

TRANSFERHULPMIDDELEN

OPSTAHULP MET ELEKTRISCHE PARALLELE POOTSPREIDING

JILL



DOOVECAREGROEP



- Staal wit gecoat frame
- Voorzien van 4 zwenkwielen, waarvan 2 beremd
- Opklap- en wegklapbare PUR ondersteuningsschalen
- Zeer flexibele PUR scheenbeenondersteuning met de mogelijkheid tot instelbaarheid
- Meerdere en op verschillende hoogtes geplaatste optrekmogelijkheden
- Elektrische parallelle pootspreiding
- Intuïtieve handbediening
- Voetplaat voorzien van antislip
- Stabiel en wendbaar
- Verschillende financieringsmogelijkheden




JILL

VEILIGE EN ERGONOMISCHE ONDERSTEUNING BIJ KORTE TRANSFERS

ONTWORPEN VOOR GEBRUIK IN ZORGINSTELLINGEN



JILL is een opstahulp en ontworpen voor cliënten die moeite hebben met het maken van een korte transfer. JILL stimuleert de cliënt om actief met eigen kracht op te kunnen staan. JILL is een trainings- en activeringshulpmiddel en biedt de cliënt mogelijkheden tot zelf uitvoeren van ADL activiteiten. Mobiliteitsklasse A,B en C.

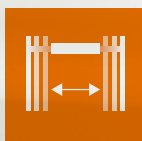

JILL beschikt over een elektrische parallelle pootspreiding. Dit zorgt ervoor dat de opstahulp altijd dicht bij de cliënt geplaatst kan worden en in vele verschillende situaties toepasbaar is; bij elektrische rolstoelen, zitstoelen, relaxfauteuils, douche-/toiletstoelen etc. JILL werkt op een Lithium batterij en wordt geleverd inclusief bijbehorende oplader.



JILL beschikt over opklap- en wegklapbare PUR ondersteuningsschalen die achter de billen van de cliënt worden geplaatst. Mede door de zeer flexibele PUR scheenbeenondersteuning wordt de sta-op functie van de cliënt vergemakkelijkt en blijft de stafunctie tijdens de transfers zoveel mogelijk geborgd.



JILL beschikt over een stevige voetplaat die is voorzien van antislip. JILL beschikt verder over meerdere en op verschillende hoogte geplaatste optrekmogelijkheden. Deze mogelijkheid draagt bij aan eventuele trainingsdoeleinden. JILL is voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 beremd.

JILL

Bedenk eens wat de JILL opstahulp voor uw organisatie kan betekenen.

- Optimale stabiliteit en veiligheid tijdens het verplaatsen over korte afstanden
- Comfortabele transfer voor de cliënt en een ergonomische werkhouding voor de zorgverlener
- Stimuleert de cliënt om met eigen kracht deel te nemen aan de transfer
- Gemaakt van robuuste en duurzame materialen
- Bekijk [onze productvideo](#)

Actieve en passieve tilliften uit ons assortiment



Specificaties JILL

Totale breedte	Minimaal 700 mm, maximaal 1000 mm
Totale lengte	925 mm
Totale hoogte	1208 mm
Binnenmaat pootspreiding	Minimaal 585 mm, maximaal 885 mm
Diepte zitting	420 mm
Zithoogte	857 mm
Zitbreedte	535 mm
Hoogte scheensteun	375 mm
Maximale belasting	130 kg

Bel voor een afspraak met onze productspecialist **0182 624 999**
of stuur een mail naar sales@doove.nl